

MODULO AUTONOMO MEDICION “GRAMAJE-HUMEDAD-COBB”

Software autonomo para determinar la HUMEDAD, el GRAMAJE y el Indice COBB de Papel y Cartón, conectada a un PC la Balanza de Humedad

“Datos en Tiempo Real...”



Analizador de HUMEDAD



Compatible con LYNX Plus y Pro

Puede operar de forma Autónoma o Integrado en el Sistema LYNX lo cual le dotaría de toda la potencia de Base de Datos, Estadísticas, Informes Configurables y en formato PDF, Informes Agrupados con otros parámetros generados en el Laboratorio de Ensayos.


- Rapidez en la ejecución de ensayos y obtención de resultados
- Sin errores humanos
- Trazabilidad conforme ISO 9000

Por medio de este Módulo de Software de Ensayos y utilizando una Balanza de Humedad, se monitorizan Digital y Gráficamente los resultados obtenidos en la Balanza.

- Indicación de los Valores Máximo – Mínimo –Medio – Desviación Estándar
- Capacidad de almacenamiento hasta 100 ensayos por cada informe
- Funciones de SALVAR – IMPRIMIR - COPIAR AL PORTAPAPELES – Informes en formato PDF

OPCIONAL: MODULO DE GESTION LYNX Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS

Permite realizar gestión de los datos, elección idiomas, generación de informes, librería de unidades, niveles de password, Introducción de valores mínimos, máximos y óptimos para explotar los datos con estadísticas, gráficas de Barras, Campanas de GAUSS, Comparativa de Tolerancias..., exportación datos a Word – Excel..., generación PDF...

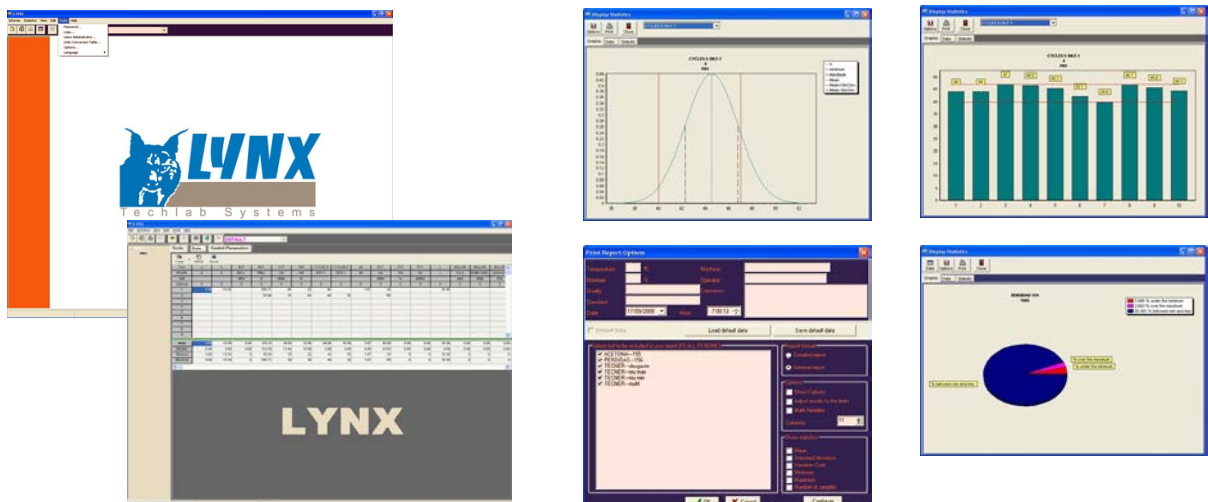

* TECHLAB SYSTEMS se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica sin previo aviso

Doc: Modulo_LYNX_Estandar-1-CAT-E-R2